

## 醫療流量計


Medical Flowmeter

### 使用方法及注意事項

型號:

- FA-OS-01~99
- FA-AS-01~99
- FA-OB-01~99
- FA-AB-01~99
- FA-OT-01~99
- FA-AT-01~99
- FA-OD-01~99
- FA-AD-01~99
- FA-OM-01~99
- FA-AM-01~99

### ▲ 重要

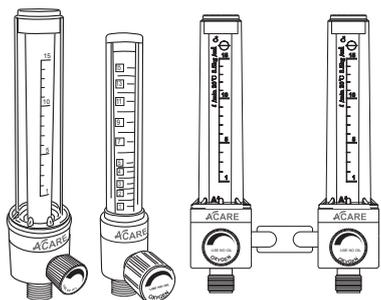

請在詳細閱讀及充分了解指示說明之後,再行裝設或使用此項設備。



### ● 注意

- ▲ 請不要允許未經訓練的人員來裝設、使用或是維護這項設備。
- ▲ 請在詳細閱讀及充分了解指示說明之後,再行裝設或是使用這項設備。
- ▲ 假若對指示內容有任何不清楚的地方,請和Acare經銷商聯繫,以取得更多的資訊。

### ● 警告

法律限制這項儀器只能使用在醫療用途或者是醫護人員的訂購。

### ● 警戒

- ▲ 氧氣為非可燃性氣體;但具有相當好的助燃性。
- ▲ 油、油脂和它的碳氫化合物若和氧氣結合,會造成更大的燃燒。因此,油污不可出現在任何氧氣會流經的地方。
- ▲ 請不要在使用氧氣氣體的區域抽菸,並遠離煙火。
- ▲ 流量計使用在345kPa (50 psi)的氣體來源裝置。
- ▲ 請不要試圖將流量計直接使用在鋼瓶上。

### ● 注意

- ▲ 最大的運作溫度不能超過60°C (140°F);最低溫度不能低於-18°C (0°F)。
- ▲ 某些流量計型號提供1/4" -18NPT出氣接頭,以符合客戶的需求使用。
- ▲ 務必使用與使用氣體相容之止洩帶或膠液。
- ▲ 務必於使用前在連接處做漏氣檢測測試。

### ● 操作

使用前,請讓產品在包裝內放置12~24小時適應室溫。

操作和儲存的溫度應根據使用本器材的醫療環境溫度進行儲存。

操作環境溫度限制: -18°C~60°C (0°F~140°F)

建議的操作環境溫度: 15°C~29°C (59°F~84°F)

建議的儲存環境溫度: -40°C~60°C (-40°F~140°F)


濕度: 最高95% 不結冰

### ● 貼標區別

- 綠色: 供氧氣(Oxygen)使用
- 黃色: 供空氣(Air)使用

### ● 使用方法

圖一

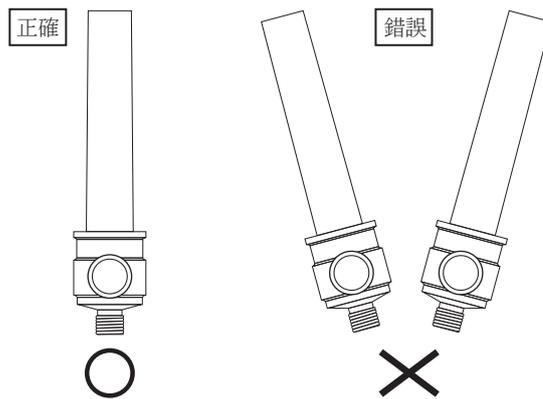

1. 將流量計安裝至345kPa (50 psi)的氣體來源裝置,並請確認流量計是保持在垂直的狀態。(請見圖一)
2. 逆時針方向旋轉流量調整閥至開始處且增加流量。
3. 調整流量調整閥至想要的流量設定。(以珠子中間點為讀取標準。)
4. 逆時針方向旋轉流量調整閥以降低且停止流量。請不要轉緊流量調整閥。

### ● 規格及材質

規格

- 進氣: Male 1/8" NPT, 可另接快速接頭形式如下
  - Ohmeda ® / Ohio ® / Diamond ®
  - Kawasaki ®
  - Oxequip ®
  - Puritan-Bennett ®
  - DISS ®
  - Chemetron ®
  - 德國形式 (DIN)
  - 英國形式 (BS)
  - 法國形式 (AFNOR)
  - 澳洲形式 (CIG)
- 出氣: Male 9/16" UNF, Male BSP 3/8" 或其他

材質

- 流量管: 聚碳酸酯 (PC)
- 流量計本體: 銅電鍍

### ● 保固

購買產品後,此產品的零件在正常使用的情况之下皆享有一年的保固期限。

其它的零件一樣也會享有其製造商的保證。

若產品產生瑕疵,在經過製造商評估後,將會在保固期限內給予最佳的服務。

若因錯誤的方法使用或是意外事件而造成毀損,那麼將不享有保固期限的服務。

### ● 維護與修理

■ 清潔: 流量管和表面是由聚碳酸酯材質製成,使用溶劑和清潔方法會影響到材質的強度和透明度。假若要清潔設備表面,可以使用無棉絮的布料和酒精來清潔產品表面的髒污。

■ 維護: 此裝備必須要定期的檢查和修理,以避免故障的情況發生。

■ 修理: 務必交由合格的維修員修理產品。

### ● 丟棄指示

請依照醫療廢棄物進行回收,或依照當政府法規進行回收丟棄。

### ▲ 警告

此產品再丟棄前需要清潔以免造成生物危害。



製造商

# ACARE

眾里科技股份有限公司二廠

新北市新莊區五權二路24號6樓之3